


Attends® Contours Regular



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Contours Regular 6 - 10 sind anatomisch geformte Einlagen, entwickelt für mittlere bis starke Harn- und Stuhlinkontinenz.

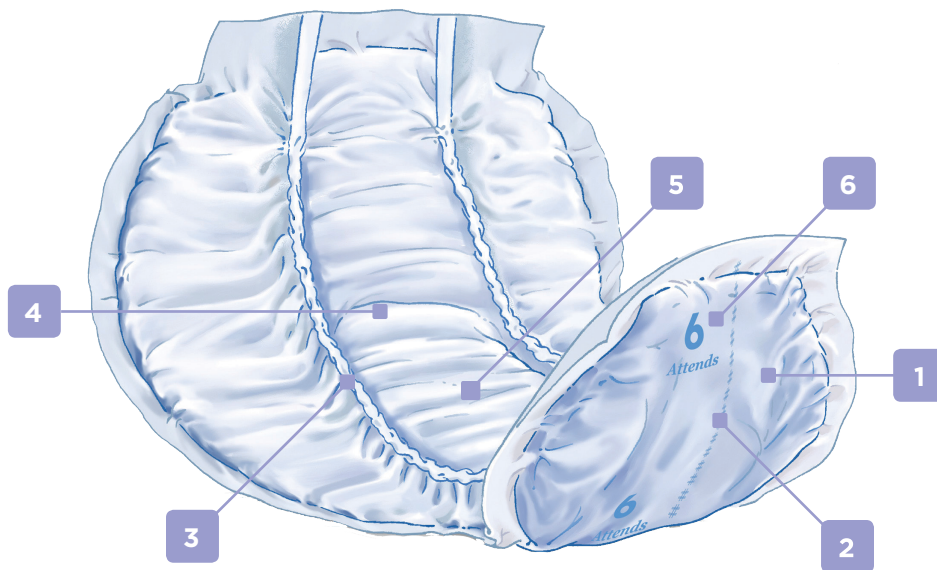

1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.

2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschimmeln an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

3 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz.

4 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.

5 Saugkern für zusätzlichen Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung.

6 Die Saugstärken-Nummer ist auf die Produktrückseite gedruckt, um eine leichte Identifizierung zu ermöglichen.

www.attends.de

www.attends.at

www.attends.ch

| | Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette | EAN 732152 Packung / Karton | PZN Packung / Karton | Hilfsmittelpositionsnummer | Länge (cm) Breite im Schritt (cm) | Außenseite Material | Saugkern Material | Innenseite Material | Auslaufsperr | Geruchsbindung (Odour Protection) | Quick-Dry Technologie |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Attends Contours Regular 6 | 35 4 x 35 24 x 4 x 35 | 201244 201251 | 6105527 6105533 | 15.25.01.1157 | 58 17,5 | Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 7 | 28 4 x 28 20 x 4 x 28 | 201268 201275 | 8756074 8756080 | 15.25.01.1156 | 58 17,5 | Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 8 | 28 4 x 28 20 x 4 x 28 | 201282 201299 | 8756329 8756341 | 15.25.01.2156 | 64,5 19 | Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 9 | 28 4 x 28 20 x 4 x 28 | 201305 201312 | 6105591 6105616 | 15.25.01.2157 | 70 19,5 | Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attends Contours Regular 10 | 21 4 x 21 24 x 4 x 21 | 205525 205532 | 6810674 6810680 | 15.25.01.2158 | 78,5 25 | Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies | ✓ | ✓ | ✓ |



Quick-Dry

Die Quick-Dry Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt die Flüssigkeit schnell auf und leitet sie von der Haut weg in den eigentlichen Saugkern. Dort wird die Flüssigkeit sicher gebunden und eingeschlossen. Das Produkt kann auf diese Weise mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen. Dies sorgt für Hauttrockenheit und Auslaufschutz auch bei längeren Tragezeiten.



pH-Wert

Das Quick-Dry-System mit Aktivfasern und Superabsorber sorgt für einen guten pH-Wert von 4,5. Somit unterstützt Attends die Hautgesundheit.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Contours Regular ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.